




苏南医疗
SUNAN MEDICAL

股骨可控加压髓内钉

Intertrochanteric Antegrade Nail

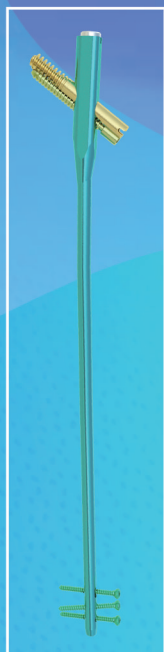

适应症 Indications

简单的轴骨折；粉碎性骨折；螺旋轴骨折；长斜轴骨折；节段性骨折；股骨转子下骨折；股骨转子间骨折；同侧股骨干/颈部骨折；囊内骨折；骨不连和畸形愈合；多发伤和多发性骨折；预防性即将发生的病理性骨折；肿瘤切除和移植后重建；骨骼延长和缩短

Simple shaft fractures; Comminuted shaft fractures; Spiral shaft fractures; Long oblique shaft fractures; Segmental shaft fractures Subtrochanteric fractures; Intertrochanteric fractures; Ipsilateral femoral shaft/neck fractures Intracapsular fractures; Nonunions and malunions Polytrauma and multiple fractures; Prophylactic nailing of impending pathologic fractures; Reconstruction following tumor resection and grafting Bone lengthening and shortening

苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司
Suzhou Sunan Zimmered Medical Instrument Co., Ltd.

股骨可控加压髓内钉


Intertrochanteric Antegrade Nail



苏南医疗
SUNAN MEDICAL

产品结构/特点 Product Structure

- 可控的线性加压 加压螺钉始终依靠髓内钉主钉, 负重时假体位置稳定、无位移,对骨折碎片无挤压, 无肢体缩短及复位,齿轮机构将注定固定在偏内的髓腔内, 以替代外侧壁受力。
- 远端开槽结构 与皮质发生接触时降低假体周围骨折的风险,易于植入,旋转稳定: 压紧配合。
- 联合锁定钉 粗隆拉力螺钉与远端可把持螺钉联合锁定, 提供了稳定性及抗旋转能力主钉。
- 近端梯形设计 主钉梯形截面设计使得股骨近端更强的稳定性。

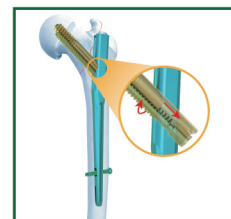

Active linear compression

The active linear compression helps the compression of the femur fracture with rotational control, eliminates excessive sliding reducing the incidence of femoral neck shortening, helps unload the lateral wall and restore the proximal femur.

The clothespin distal tip

The clothespin distal tip of the INTERTAN short nail reduces the overall cross-sectional stiffness of the implant to minimize the risk of iatrogenic fracture during insertion, to ease the actual process of nail insertion and to offer enhanced rotational stability within the proximal femoral canal.

Integrated interlocking screws

The integrated interlocking screws increase stability and resistance to both intra and post-operative fracture rotation about the implant by providing two points of fixation within the femoral neck and head. This directly reduces rotational instability and eliminates the possibility of implant failure due to Z-Effect.

Trapezoidal shape

The smaller cross-section of the INTERTAN nail has the advantage of preserving the Gluteus Medius Tendon while at the same time not compromising the overall strength of the implant. The trapezoidal shape of the nail places more material at the lateral side of the implant where tensile forces are typically the strongest. In addition, the nail's trapezoidal profile also provides enhanced anatomical fit and added rotational stability in the proximal femoral metaphysis similar to that offered by conventional hip stems.

产品信息

Information

股骨可控加压髓内钉(标准型) Intertrochanteric Antegrade Nail (Standard Type)	产品编号 Product No.	直径 Diameter	长度 Length/mm	材质 Material
	4227.1018	10	180	钛合金 Titanium Alloy
	4227.1020		200	
	4227.1118	11.5	180	
	4227.1120		200	
	4227.1318	13	180	
	4227.1320		200	

近端塞 End Cap	产品编号 Product No.	材质 Material
	4229.0000	钛合金 Titanium Alloy

拉力钉螺钉 II Intergrated Interlocking Lag Screw II	产品编号 Product No.	直径 Diameter	长度 Length/mm	材质 Material
	4228.1165-115	11	65-115	钛合金 Titanium Alloy
备注: 每5mm一个规格 Note: with 5mm difference				

股骨可控加压髓内钉(加长型)(左/右) Intertrochanteric Antegrade Nail (Lengthen Type) (left/right)	产品编号 Product No.	直径 Diameter	长度 Length/mm	材质 Material
	4231/2.10300	10	300 Left/Right	钛合金 Titanium Alloy
	4231/2.10320		320 Left/Right	
	4231/2.10340		340 Left/Right	
	4231/2.10360		360 Left/Right	
	4231/2.10380		380 Left/Right	
	4231/2.10400		400 Left/Right	
	4231/2.11300	11.5	300 Left/Right	
	4231/2.11320		320 Left/Right	
	4231/2.11340		340 Left/Right	
	4231/2.11360		360 Left/Right	
	4231/2.11380		380 Left/Right	
	4231/2.11400		400 Left/Right	
	4231/2.13300	13	300 Left/Right	
	4231/2.13320		320 Left/Right	
	4231/2.13340		340 Left/Right	
	4231/2.13360		360 Left/Right	
	4231/2.13380		380 Left/Right	
	4231/2.13400		400 Left/Right	

拉力钉螺钉 Compression screw	产品编号 Product No.	直径 Diameter	长度 Length/mm	材质 Material
	42298.0770-12	7	70-120	钛合金 Titanium Alloy
备注: 每5mm一个规格 Note: with 5mm difference				

苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司

Suzhou Sunan Zimmered Medical Instrument co., Ltd.

地址: 江苏省张家港锦丰镇合兴昆仑山路

Add: Kunlunshan road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu

国内(China) 销售电话: +86-512-58500520

+86-18651128828

国际(International) Tel: +86-512-56913892

Tel / WhatsApp: +86-18651128828

传真(Fax): +86-512-58508580

邮编(P.C): 215626

邮箱(E-mail): Jenny.wang@zimedede.com

网址(Web): www.zimedede.com



扫一扫了解更多>>>